

WOMAN
— COSMETICS —

הטכנולוגיה הטיפולית הניידת
המובילה בעולם

REVIVER



טיפול מתקדם לטיפול העור
womancosmetics.co.il

FDA

משרד
הבריאות
הרפואית



מדריך למשתמש REVIVER

שלום!

תודה שרכשת את REVIVER מבית
Spacetouch וברוכה הבאה למשפחת
WOMAN COSMETICS.

אין השקעה טובה יותר מאשר ההשקעה
בעצמך! את עכשיו חלק מקהילה ההולכת
וגדלה של מיליוני אנשים המשתמשים
בטכנולוגיה המתקדמת בעולם, להשגת
תוצאות מיטביות.

כאשר את מוציאה את המכשיר החדש
מהאריזה, הקדישי כמה רגעים לעיין
במדריך והכירי את תכונותיו. ההוראות
מספקות פרטים חשובים כיצד להפעיל
את המכשיר שלך בבטחה.

Spacetouch מחויבת לספק את חווית
טיפול העור הטובה ביותר!


במידה ויש לך שאלות, צוות שירות
הלקוחות שלנו ישמח לעזור.
ניתן ליצור איתנו קשר בכתובת:
office@womancosmetics.co.il


תוכן עניינים

המכשיר	03
ברוכים הבאים	05
הראשים	06
סדרת אמפולות	09
הוספה או הסרה של אמפולות	11
הפעלת המכשיר	14
טיפים לתחזוקה ואחסון	16
טעינת המכשיר	16
ניקיון ותחזוקה	17
הנחיות בטיחות למשתמש	19
הנחיות בטיחות למכשיר	21
מפרט המוצר	23
שאלות נפוצות	24
הנחיות טיפול בטוח בסוללה	25


תכולה

גוף המכשיר	X1
ראש אינפרא אדום (IR)	X1
+ אור אדום וחימום	
ראש EMS	X1
ראש מיקרונידלינג	X1
בקבוק אמפולה 3 מ"ל	X12
בסיס טעינה	X1
מחט	X1
כבל טעינה	X1

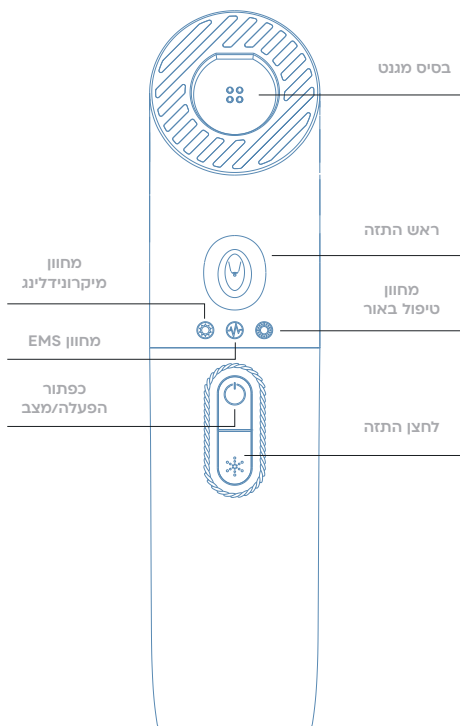

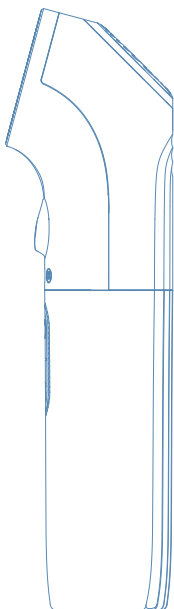


צד

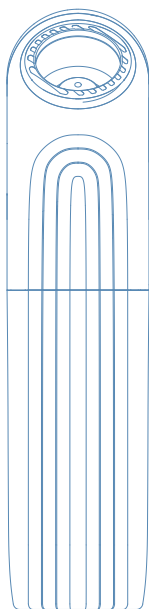

גב



ראש EMS

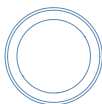

ראש טיפול אינפרא אדום




ראש מיקרונידלינג

בסיס טעינה

בקבוק אמפולה 3 מ"ל



טבעת סיליקון

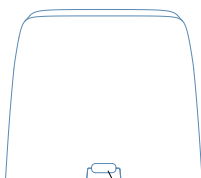

שקע טעינה

ברוכים הבאים לעתיד טיפוח העור עם מכשיר REVIVER החדש.

צאי למסע מהפכני לקבלת תוצאה מיטבית לעור עם מכשיר חדיש ומוקפד, המתוכנן לשנות את שיגרת הטיפוח שלך.

Reviver הוא לא רק מכשיר, הוא תחנת עבודה כוח קומפקטית, מיזוג מלוטש של עיצוב עם פונקציונליות חדשנית. הוא מצויד בשלושה ראשי טיפול, שכל אחד מהם מותאם לצרכי טיפוח עור שונים, המבטיחים גישה מקיפה לבריאות העור.

בנוסף, מה שבאמת מייחד את Reviver הוא nano serum mister חדשני. זהו סרום, המשלב פטנט רשום טכנולוגי, וחודר לעומק העור שלך ברמה גבוהה, בעזרת 3 ראשי המכשיר. תרכיזי הסרום, משפרים את יעילות הטיפול.

המשימה שלנו בעיצוב Reviver הייתה להביא את התחכום המקצועי ביותר לטיפוח העור הנמצא בידיים שלך. אם את מקצוענית מנוסה או חובבת את טיפוח העור בבית, מכשיר זה שובר את המחסומים, מסייע לטיפוח עור מתקדם, נגיש ונוח לכולם. הוא פשוט לתפעול, יעיל ונייד, כך שתוכלי ליהנות מחוויית טיפוח העור בכל מקום ובכל זמן.

ארבע שנים של מחקר קפדני ופיתוח הגיע לשיאו ב-Reviver, המכשיר הקומפקטי ביותר אך המתקדם ביותר שלנו נכון להיום, עם שבעה פטנטים רשומים. העיצוב המיוחד והחזק במיוחד כולל שלושה ראשים מגנטיים הניתנים להחלפה בקלות יתר המאפשר לך להתאים אישית את

טיפול העור שלך.


שלושת ראשי הטיפול המגנטיים הם הבסיס של המסע שלך לרמה מקצועית בטיפול העור בנוחות בבית.

אמצי את האלגנטיות והאפקטיביות של Reviver, היכנסי לעולם שבו טיפוח עור נמצא בקצות אצבעותיך.

הראשים

שיקום העור

ראש מיקרונידלינג

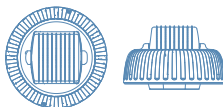

לצלול לתוך העולם של microneedling, טכניקה פורצת דרך שנועדה להצעיר את העור.

שיטה זו ידועה ביכולתה לעשות זאת באופן משמעותי לשפר את מראה מרקם העור שלך. בין אם את מחפשת להפחית סימני מתיחה, להפחית צלקות, להחליק קמטים, או לטפל בפגמים אחרים בעור, מיקרונידלינג הוא הפתרון שלך לדרך חדשה.

כהשלמה לטיפולי פנים אחרים המסתמכים על חום, או לייזר, מיקרונידלינג בולט עם סיכון מינימלי לשינוי גוון העור. זוהי דרך בטוחה ויעילה להשיג גוון עור צעיר וקורן יותר.


המלצת שימוש:

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אנו ממליצים להשתמש בראש המיקרונידלינג אחת ל-4 עד 6 שבועות על עור נקי למשך 15 דקות בכל טיפול.
- התאימי את תהליך המיקרונידלינג לאחד מסרום הננו שלנו שפותח במיוחד ונמצא באמפולות כדי להשיג תוצאה יוצאת דופן. שילוב זה נועד להעצים את היתרונות ולהשאיר את העור שלך חיוני וזוהר.

אנטי אייג'ינג,

מגביר לחות וייצור קולגן

ראש אינפרא אדום (IR) + אור אדום וחימום

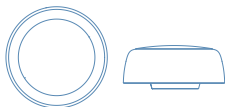

גלי את הסוד לעור צעיר וקורן עם אור אדום + IR החדשני שלנו. רתימת העוצמה של אור אינפרא אדום וגם אור אדום, זהו כלי חדשני ומועדף בקרב מומחים לטיפול העור ואנשי מקצוע רפואיים, הוא מפחית קמטים וקמטוטים, מרגיע דלקות, מאיץ ריפוי לאחר הליכים רפואיים, ומצעיר את העור.

מה הופך את הטיפול הזה לכל כך יעיל?

הטיפול באור אדום מגביר את ייצור הקולגן בעור. הקולגן הוא מרכיב חיוני עבור עור מוצק וחלק. תוכלי להבחין מיידיית בשיפור משמעותי בגוון העור שלך, במרקם, ובגמישות.

המלצת שימוש:

- לקבלת תוצאות טובות יותר, אנו ממליצים להשתמש בראש IR+RED, 5 פעמים בשבוע על עור נקי למשך 15 דקות בכל פעם.
- לקבלת יתרונות משופרים יותר, יש להרכיב את קפסולות הסרום הבלעדי שלנו הנמצא באריזה להשגת תוצאות טובות יותר.

הרמה, חיטוב והבהרה

ראש EMS



שדרגי את שגרת טיפוח העור שלך עם EMS מתקדם (גירוי שריר חשמלי) ראש טכנולוגי מעוצב, המצעיר את העור מבפנים. EMS מחולל פלאים על ידי הרמה עדינה וחיטוב העור שלך. הוא מגביר את ייצור הקולגן והאלסטין, אלמנטים חיוניים שהעור שלך צריך כדי לבנות מחדש את המבנה הפנימי שלו. כתוצאה מכך, תוכלי להבחין בעלייה יוצאת דופן בגמישות ועובי העור שלך.

בנוסף לכך שה-EMS משפר את מרקם ומוצקות העור שלך, הוא גם מפחית משמעותית צלוליטיס, עור נפול וסימני מתיחה. זוהי דרך מהפכנית להשיג עור מוצק יותר ללא ניתוח או זריקות.

ראש זה כולל גם טיפול חדשני באור LED כחול. תוך שימוש באורכי גל ספציפיים של אור כחול (405-410 ננומטר), טיפול זה חוזר לעומק העור כדי לחסל חיידקים.

יעיל במיוחד בהפחתת בעיות עור כגון פיגמנטציה וגוון העור, ומשאיר את העור נקי וקורן יותר.

על ידי השילוב העוצמתי של EMS ו-LED כחול, ראש זה הוא תחנת כוח לחיטוב ומיצוק עור הפנים. העבודה בסינרגיה מאירה את העור ומעניקה לו זוהר מושלם.

המלצת שימוש:

- לקבלת התוצאות הטובות ביותר, אנו ממליצים להשתמש בEMS ואור LED כחול, 5 פעמים בשבוע על עור נקי במשך 15 דקות בכל טיפול.
- שפרי את החוויה שלך על-ידי התאמה של אחד מאמפולות ה-Mist-Nanon הבלעדיים שלנו, שנועדו להגביר את היתרונות של הטיפול.

אמפולות SPACETOUCH

מותאמות לפנים ולגוף

סדרת האמפולות שלנו מהפכניות לטיפול העור, ולטיפולי פנים וגוף.

באמצעות טכנולוגיית Mist-Nanon החדשנית, האמפולות הופכות לתרסיס עדין המבטיח חדירה עמוקה וספיגה אופטימלית לתוך נקבוביות העור. תהליך זה מגביר את אפקטיביות החומרים הפעילים, ומספק תוצאות מדהימות.

האמפולות

התנסי בעוצמה של דיוק בטיפול העור עם הנוסחה המיוחדת שלנו. כל בקבוקון זעיר עמוס במרכיבים עוצמתיים בריכוז גבוה, שנועדו לטפל בבעיות עור ספציפיות בדיוק נקודתי.

בין אם את מעוניינת להעניק לחות, להבהיר, או להצעיר, האמפולות שלנו מספקות את המינון הנכון, בדיוק במקום שבו את צריכה את זה.

גלי את מאפייני האמפולות שלנו:

מכשיר ה Reviver שברשותך מגיע עם מבחר בלעדי של ארבעה סוגי אמפולות עם נוסחאות שונות, שכל אחת מהן נועדה לטפל בצורך שונה:

- תיקון - לעור שזקוק לריפוי לחות וזוהר, להחדיר לעורך לחות, לעור קורן ומלא ברק
- הרמה וחיטוב – למראה מוצק ומפוסל יותר.
- הבהרה - להאיר ולאזן את גוון העור שלך

שימוש ללא מאמץ

עם מכשיר ה REVIVER

מכשיר ה Reviver מפקיד את השליטה בידייך. התאימי את כמות האמפולה בשימוש פשוט על ידי לחיצה על כפתור ההתזה.

זוהי תכונה ידידותית המאפשרת לך לפזר את התרסיס באופן שווה על העור שלך ולהבטיח מריחה אחידה בכל פעם.

הישארי מצוידת

כדי לחדש את האמפולות שלך או לחקור נוסחאות אחרות, בקרי באתר האינטרנט שלנו בכתובת womancosmetics.co.il


לחלופין, ניתן להתייעץ עם אסתטיקאית של WOMAN COSMETICS לקבלת המלצות מותאמות אישית.

תני לעור שלך לחוות את העתיד של טיפוח
העור עם מוצרי WOMAN COSMETICS.

הוספה או הסרה של האמפולות הכנסת אמפולה


1. הכיני את האמפולה: כל אמפולה מכילה
מינון מדויק של 3 מ"ל.

הסירי בזהירות את מכסה האמפולה עם
כיוון החץ המסומן על גבי האמפולה.
ודאי שהאמפולה ישרה ויציבה במהלך
הסרת המכסה.

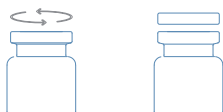


2. חברי את האמפולה: החליקי בעדינות
את האמפולה לתוך המכשיר, יישרי אותו
עם מגן הסיליקון המצורף.

זכרי: האמפולה צריכה להישאר ישרה
ויציבה – אל תהפכי אותה. במקום
זאת, הפכי את גוף המכשיר ומקמי אותו
בעדינות על האמפולה, לחצי בעדינות עד
שהאמפולה תיכנס למקומה.

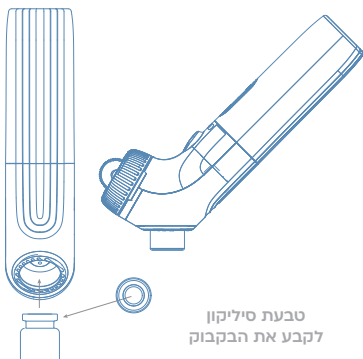


3. מוכן לשימוש: ברגע שהאמפולה מחוברת היטב, ניתן ליישר את גוף המכשיר. עכשיו הוא מוכן לשימוש.

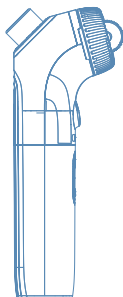


הסרה או החלפה של אמפולה הוספת אמפולה


1. מיקום יציב: החזיקי את המכשיר כך שהאמפולה ישרה, בדיוק כמו שעשית כשהכנסת אותו.

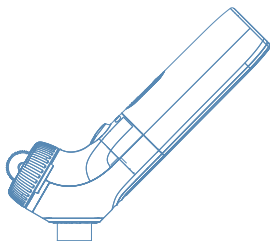

2. הסרה עדינה: אחזי היטב באמפולה והרימי בזהירות את המכשיר כלפי מעלה, תוך ניתוק האמפולה. במידה ויש שאריות של סרום, וודאי שהוא מתנקז חזרה לאמפולה.

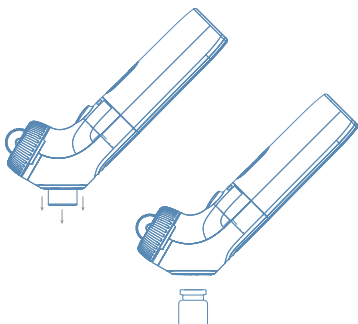

3. ניקוי: במידת הצורך, נגבי את מזין האמפולות עם מטלית יבשה כדי לשמור על הנקיון.

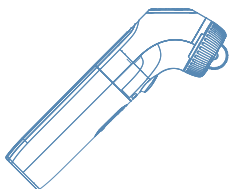

הפעלת המכשיר

מכשיר ה Reviver שברשותך כולל מערכת אוטומטית מתקדמת לזיהוי ראשים.

עיצוב חדשני זה מבטיח כי ניתן להשתמש בכל הלחצנים במכשיר לסירוגין ללא בעיות תפעוליות.

המכשיר מתוכנת לכיבוי אוטומטי לאחר 30 דקות של פעולה רציפה לנוחות ובטיחות.

שימוש ב"מתז הסרום"

כדי להפעיל את המתז:

1. לחצי על לחצן המתז.
2. כדי לבטל את ההפעלה, לחצי על לחצן המתז.

ראש מיקרונידלינג

הגדרת ראש המיקרונידלינג:

1. חברי את ראש המיקרונידלינג למכשיר. נורית החיווי Microneedle תידלק ותאותת שהמכשיר מוכן.
2. לקבלת תוצאות אופטימליות, התיזי את הסרום עם המתז לפני או תוך כדי השימוש בראש הרולר Micro Needle.

ראש EMS (גירוי שריר חשמלי)

ב-EMS ישנם 3 עוצמות

הפעלת מצב EMS:

1. חברי את ראש ה-EMS למכשיר. המכשיר יעבור אוטומטית למצב ה-EMS. לחיצה קצרה נוספת על לחצן

ההפעלה תתאים את העוצמה. ישנן
3 עוצמות שונות.

2. לחצי על כפתור "הפעלה" במשך
כ-1.5 שניות להפעלת מצב ה EMS
ואור כחול. נורית החיווי EMS תאותת
שהמצב פעיל.

3. כדי לכבות את מצב ה EMS, לחצי שוב
לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה
למשך כ-1.5 שניות. נורית החיווי של
ה EMS תכבה.

4. לקבלת יתרונות משופרים, שלבי בכל
טיפול את אחת מאמפולות ה nano
mist הבלעדיות שלנו.

ראש אינפרא אדום (IR) + אור אדום וחימום

הפעלת מצב אור אדום:

1. חברי את ראש האור האדום למכשיר.
המכשיר ייכנס אוטומטית למצב אור
אדום.

2. לחצי על לחצן ההפעלה למשך
כ-1.5 שניות כדי להפעיל את הטיפול
באור אדום. נורית החיווי לטיפול
באור תידלק כדי להראות שהיא
פעילה.

3. כדי לכבות את מצב הטיפול, לחצי שוב
לחיצה ממושכת על לחצן ההפעלה
למשך כ-1.5 שניות. נורית החיווי
לטיפול באור תכבה.

טיפים לתחזוקה ואחסון

1. החזירי תמיד את המכשיר לבסיס הטעינה שלו לאחר כל שימוש. פעולה זו תבטיח שהמכשיר תמיד טעון ומוכן לטיפול הבא שלך. יש לנתק את המכשיר ממקור חשמל בסיום הטעינה.
2. אחסני את האמפולות במקום קריר ויבש. הרחיקי אותם ממקום לח ורטוב. אין צורך לקרר את האמפולות.
3. כדי להבטיח ביצועים טובים יותר והארכת חיי המכשיר, שמרי על ראשי המכשיר נקיים.
4. גוף המכשיר אינו עמיד למים, אין להכניס אותו למקלחת או לשטוף אותו תחת מים זורמים. כל מה שאת צריכה לניקוי המכשיר הוא מטלית לחה לחלק החיצוני.

טעינת המכשיר

1. **התראת סוללה חלשה:** במידה והחשמל במכשיר עומד להיגמר, מחוון ההפעלה יהבהב 5 פעמים לפני שההתקן יכבה באופן אוטומטי.
2. **מפרט מתאם נדרש:** השתמשי במתאם עם מתח יציאה של 5V DC.
3. **אפשרויות טעינה:** יש לך שתי אפשרויות לטעינת המכשיר:
 - טעינה ישירה באמצעות כבל: חברי את התקן למקור חשמל באמצעות ספק כבל.
 - טעינה בסיסית: הניחי את המכשיר על בסיס הטעינה. כאשר הבסיס

מחובר לחשמל, נורית החיווי שלו תהיה במצב הפעלה.

4. מחווי טעינה:

- במהלך הטעינה: בזמן שהמכשיר נמצא בטעינה, נורית ההפעלה במכשיר תהבהב, ותאות שהטעינה נכנסת ומתקדמת לקראת טעינה מוחלטת.
- טעינה מלאה: בדרך כלל אורכת 2 עד 3 שעות כדי לטעון את המכשיר במלואו. כאשר נורית ההפעלה נכבית סימן שהטעינה מלאה.
- שימוש במהלך טעינה: לא ניתן להשתמש במכשיר בזמן הטעינה כדי להבטיח בטיחות ותקינות המכשיר שלך.

ניקיון ותחזוקה / הנחיות

גוף המכשיר

- גוף המכשיר אינו עמיד למים.
- הימנעי מריסוס או טבילה במים.
- כדי לנקות את משטח, המכשיר נגבי אותו בעדינות עם מטלית לחה או מעט מאוד רטובה.
- נקי את המרסס / המתז באמצעות מים מזוקקים או באלכוהול רפואי כדי לקבל ביצועים טובים יותר.
- לאחר המילוי, רססי החוצה את שאריות המים. נורית החיווי שלו תהיה במצב הפעלה.

ראש מיקרונידילניג רולר

- ראש המיקרונידילניג עמיד למים וניתן לנקות או לחטא אותו על ידי טבילה זהירה באלכוהול רפואי או מים.
- יש לנקות את ראש המיקרונידילניג בזהירות כדי להימנע מנזק.
- לאחר כל שימוש, יש לנקות ולייבש את ראש המיקרונידילניג ביסודיות. יש לאחסן במקום יבש, הרחיקי מאור ישיר לשמירה על מצבו.

ראש EMS

- נקי את הראש באמצעות מים מזוקקים או אלכוהול רפואי לתוצאות ביצוע אופטימלי
- אין להשתמש בכימיקלים קשים או נוזלים קוריוזיים לניקוי, היכולים להזיק לראש.

ראש אור אדום

- נקי את ראש האור האדום באמצעות מים מזוקקים או אלכוהול רפואי.
- בדומה לראש EMS, הימנעי משימוש בנוזלים קוריוזיים לניקוי ראש האור האדום כדי לשמור על הפונקציונליות שלו.

הנחיות בטיחות למשתמש

- 1. חשוב:** אין להשתמש במכשיר ליד מכשירים רפואיים כמו קוצבי לב, מכונות לב-ריאה, אלקטרוקרדיוגרפים וכדומה.
- 2. שימוש עדין:** הימנעי מהתעכבות על אחד מאזורי העור זמן רב מדי או שימוש יתר במכשיר על אותו מקום.
- 3. תגובת עור לאחר שימוש:** זה נורמלי אם את חווה גירוי קל בעור או אדמומיות לאחר שימוש, מכיוון שהמוצר ממריץ את זרימת העור. אלו תגובות זמניות הנעלמות אחרי זמן קצר.
- 4. אמצעי זהירות לטיפול העור:** אין להשתמש במכשיר זה על אזורים שטופלו לאחרונה בהליכים קוסמטיים כגון ניתוחים פלסטיים, ניתוח אף או הסרת שיער. הימנעי משימוש במכשיר אם את מרגישה לא טוב, עייפה מדי, או אם את עם בעיות עור חריגות. המכשיר לא מתאים לשימוש בסביבה הקרובה לעיניים, עפעפיים, או שפתיים.
- 5. התייעצי עם שירותי בריאות:** זה מוצר טיפוח יופי, ואינו מיועד לשימוש רפואי. אם את תחת טיפול רפואי, יש להתייעץ עם הרופא שלך לפני השימוש, במיוחד אם יש לך מחלה קשה, או אם קיבלת לאחרונה טיפול הדורש מנוחה, או במידה ואת סובלת ממחלות חריפות.
- 6. טיפול ואחסון:** אין לפרק, לתקן או לשנות את המכשיר. יש להרחיק אותו מחומרים דליקים ומחוך להישג ידם של ילדים. המכשיר אינו עמיד במים,

לכן הימנעי משימוש בסביבה לחה כמו
חדרי אמבטיה או בזמן המקלחת.

7. הוראות ניקוי: לאחר השימוש, יש לנגב
בעדינות את גוף המכשיר באמצעות
מטלית לחה ולהימנע משימוש
במטלית קשה או בחומרים ממיסים
כמו בנזין, מדללים או אלכוהול. ודאי
שהידיים שלך יבשות בעת חיבור או
ניתוק. נקי את כבל החשמל באופן
קבוע למניעת נזק והצטברות של
אבק.

8. טיפול זהיר: הימנעי מנפילה או חשיפת
המוצר לנזקים שונים המשפיעים על
פעולת המכשיר. לפני השימוש, בדקי
אם יש סימנים של נזק, כגון סדקים
או מומים. הפסקי להשתמש בו באופן
מידי אם את מבחינה בנזק כלשהו
או תקלה.

9. הסרת תכשיטים: יש להסיר תכשיטים
ואביזרי צוואר כמו עגילים כדי להבטיח
בטיחות ונוחות בטיפול.

10. יש להשתמש בכבל המצורף בלבד!

11. אחריות: אחריות יבואן - שנתיים מיום
הרכישה.

האחריות לא כוללת מכה / שבר /
שימוש שאינו סביר.

אי הקפדה על הנחיות אלה פוטרת
אותנו מכל אחריות לפציעות, תקלות,
או נזק כתוצאה משימוש שגוי, פירוק
או שינויים בלתי מורשים.

הנחיות בטיחות למכשירים:

הנחיות למרסס / מתז

- **נוזלים ללא חלקיקים:** יש להשתמש רק באמפולות Spacetouch המקוריות כדי למנוע סתימה במכשיר.
- **ניקוי:** שטפי את המרסס / מתז עם מים נקיים לפני ואחרי כל אחד שימוש.
- **פתיחת סתימה:** אם הזרבובית חסומה, פתחי בעדינות את החסימה באמצעות מחט הנמצאת באריזה.
- **בטיחות העור:** הימנעי משימוש במרסס על עור פגום, או מודלק.

הנחיות לראש MICRONEEDLE

- **אופן ההכנה:** נקי תמיד את המכשיר לפני השימוש בראש MICRONEEDLE.
- **חיטוי:** יש לעקר את הראש עם אלכוהול רפואי לפני השימוש למניעת זיהומים חיידקיים.
- **הכנת העור:** ודאי שהעור שלך נקי, מלכלוך או שומן.
- **טכניקת שימוש:** ניתן למרוח סרום לפני או במהלך הגלגול.
- **מריחה עדינה:** מגלגלים בעדינות ללא לחץ מוגזם כדי להימנע מנזק לעור.
- **אזורים רגישים:** יש להימנע באזורים רגישים כמו עיניים ושפתיים.
- **טיפול לאחר השימוש:** מומלץ להשתמש בחומרי הטיפול של Woman Cosmetics אחרי השימוש במכשיר.
- **חובה למרוח מקדם הגנה לאחר השימוש ולפני חשיפה לשמש.**
- **תחזוקה:** נקי וייבשי את ראש הרולר

לאחר כל שימוש. אחסני אותו במקום יבש. יש להרחיק מאור ישיר.

- **החלפת ראש רולר:** יש להחליף את ראש המיקרונידלינג כל חצי שנה (לאחר שימוש של פעם בחודש בממוצע).
- **הערת בטיחות:** אין להשתמש ברולר אם המחטים מעוותות, מזוהמות, או אם העור פגום, עם כיב או מודלק.

הנחיות לראש EMS

- **שימוש משולב:** ראש EMS יכול להשתלב בשימוש עם ראש האור האדום.
- **רצף השימוש:** השתמשי בראש ה-EMS לפני, אבל לא אחרי מיקרונידלינג.
- **תווך מוליך:** בעת השימוש בראש ה-EMS יש להשתמש תמיד עם האמפולות של Spacetouch
- **בטיחות העור:** הימנעי משימוש ראש ה-EMS על עור פגום, עם כיב, או עור מודלק.

הנחיות לראש אור אדום

- **שימוש משולב:** ניתן להשתמש לצד ראש האור האדום עם ראש ה-EMS.
- אל תהססי להשתמש בראש האור האדום לפני או אחרי מיקרונידלינג.
- **אזהרת טמפרטורה:** האור האדום פועל בסטנדרט טמפרטורה של 42°C (יש להפסיק את השימוש באופן מיידי במידה ויש תחושת צריבה).
- **בטיחות העור:** אין להשתמש בראש האור האדום על עור פגום, עם כיב, או עור מודלק.

מפרט המוצר



פרמטרים

גודל המוצר	198*69*75 מ"מ
הספק מדורג	12W
קיבולת סוללה	1200mAh
מתח	5VDC
זמן טעינה	2-3 שעות
אורך המחט	0.5 מ"מ
חומר מחט	SUS304
אורך גל אור אדום	630nm
אורך גל אור אינפרא אדום	840nm
קיבולת אמפולה	3 מ"ל
טמפרטורה מדורגת	42°C

שאלות נפוצות

1. המכשיר לא מזהה את הפונקציה המתאימה לראש באופן אוטומטי.

מה לעשות: יש לוודא שסיכות המגנט של המכשיר בולטות החוצה כמו שצריך. כמו כן, יש לבדוק שהפתחים להזנת האמפולות נקיים וללא לכלוך.

2. האם זה בסדר להשתמש בסרום סמיר?

אין להשתמש בסרומים אחרים מלבד האמפולות של Spacetouch.

3. האם ראש MICRONEEDLE גורם כאבי עור במהלך השימוש?

תחושת דקירה קלה היא נורמלית בעת שימוש בראש MICRONEEDLE. אם הראש לא מתגלגל בצורה חלקה, יש להפסיק מיד למניעת שריטות בעור. אין לגרור את הרולר הצידה.

4. המכשיר לא נדלק ולא נכבה והמחונן מהבהב?

מצב זה בדרך כלל מעיד על סוללה חלשה. חברי את ההתקן למתח DC 5V מקור לטעינה. 4. טווח הזמן נע בין 2 ל 3 שעות.

הנחיות סילוק וטיפול בטוחים

הנחיות מחזור וטיפול בסוללות נטענות
(ליתיום יוניון):

כדי לשמור על סביבה בטוחה, עקבי אחרי
הנחיות אלה עבור המכשיר שלך:

1. סוללה נטענת: בלעדיות לסוללה:
השתמשי בסוללה שנועדה עבור
המכשיר הזה בלבד.

2. טיפול בגוף המכשיר: אל תנסי לפרק,
להכות, או לחשוף את המכשיר
למקורות שהוא לא יועד לו.

3. מחוון נפיחות: הפסקי להשתמש
במכשיר אם הוא התנפח.

4. אמצעי זהירות טמפרטורה: הימנעי
מחשיפת המכשיר לרמות טמפרטורות
גבוהות.

**5. הפסיקי את השימוש אם הסוללה
נרטבת.**

6. נזק פיזי: אין לנקב, להכות בכוח, או
לשנות את מבנה המכשיר.

7. בטיחות סוללה: יש להימנע מחיבור
ישיר של הסוללה.

8. אמצעי זהירות לאחסון: יש להרחיק
את המכשיר מחפצי מתכת קטנים
כמו שרשראות או סיכות ראש.

9. בטיחות ילדים: הרחקי את הסוללה
מתינוקות.

**10. במידה ונוזל הסוללה בא במגע עם
העיניים, יש לשטוף עם מים זורמים**

ולפנות לעזרה רפואית מיידיית כדי
למנוע עיוורון.

11. מגע עם העור: במידה ונוזל הסוללה
נוגע בעור או בבגדים, זה עלול
לגרום לגירוי או פציעה. יש לשטוף
את האזורים הפגועים במים זורמים
ולפנות לקבלת סיוע רפואי אם אי
הנוחות נמשכת.

12. סילוק ותיקון: יש לפרק את המכשיר
רק כדי להיפטר מסיכונים כמו אש או
התחשמלות.

13. סילוק סוללות: בעת השלכת ההתקן,
תחילה כבי אותו והסרי סוללת
הליתיום-יון. העבירי את הסוללה לאיש
מקצוע / סוכנות מיחזור המתמחה
בסוללות נטענות.



03-6716866



office@womancosmetics.co.il



womancosmetics.co.il



womancosmeticsisrael



woman.cosmetics.israel



מגדלי התאומים 1,
ז'בוטינסקי 33, רמת גן